



FUJIKURA COMPOSITES

# 感染対策 陰圧式エアートtent

エアー充気のみで自立する  
前室・本室一体構造モデルです



陰圧・陽圧可能(CDCガイドライン準拠)



FUJIKURA COMPOSITES

“いのち”をささえる

# エアータントの特長

【多種多様な用途】 様々な災害に対応

【取り扱いが容易】 簡単設営の一体型、安全な非金属、便利なフック

## 多種多様な用途

### マルチ防災型



パンデミック・簡易手術、一般防災など、災害に合わせて多目的に利用できます。

### 完全二重天幕



空調管理が難しいパンデミック時を想定し、内幕だけでも安定する完全二重天幕構造です。




## 取り扱いが容易(簡単・安全・便利)

### 一体型構造



簡単に設営できる様、「**エア充填のみで自立する構造**」かつ「**前室、本室一体構造**」です。

### 非金属・室内フック18か所

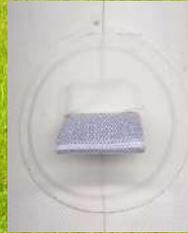

- ・非金属仕様
- 1) 室内フック
- 2) 外部ロープフック
- 3) チャック

完全非金属の安全性に加え、点滴や非常灯を引っ掛けるフックが多数設置されています。

## 様々な災害に



陽圧使用時  
(前室に空気清浄機を設置)

医療従事者向けに開発されましたが、一般防災エアータントとしても利用可能です。

	標準本体
サイズ	W4.7m × L8.0m × H2.75m
重量	約140kg
素材	PVC

# パンデミック対応 (\*注1)

【GC63/長野計器株】 常時テント内の圧力を監視

【AIRCLEAN Compact】 CDCガイドラインに準拠した陰圧装置

\*注1: 陽圧対応も可能ですが、ここでは主に陰圧(パンデミック)時の説明となります。

## 標準付属品

### 陰圧の管理

#### GC63



本室と前室の間に取り付ける事で、本室内の圧力を常にチェックします。

オプションで遠隔監視やパソコンでのデータ収集も可能です。

画像提供 長野計器株

## オプション品

### マルチ簡易ベッド

#### FKB



診察時に便利なIVポールと転落防止のベッドガード付きのベッドは、収納時厚さ15cmとコンパクトです。

## 陰圧時イメージ



### 前室 (待合室)



### 本室 (診察・救護)



↓ 排気

## 陰圧対応 空気清浄機

### AIRCLEAN Compact

陰圧・陽圧時にもテント内の空気清浄と脱臭を行います。

#### AIRCLEAN Compact 起動後、陰圧エアテントになるまでの目安

20秒	テントが少し内側に縮みます。
40秒	テントの縮みが止まり、テント内が徐々に陰圧になっていきます。
60秒	<b>陰圧2.5Pa以上</b> で安定し、陰圧エアテントとして利用可能となります。





# FUJIKURA COMPOSITES

ご要望に応じ各種オプション対応も可能です。



藤倉コンポジット株式会社

## High Quality and High Safety



- 製品(カタログ)の色は、実際の色と若干異なる場合があります。
- 製品改良の為、仕様・デザインを予告なく変更する場合があります。



藤倉コンポジット株式会社

引布加工品事業部 営業部

〒135-0063

東京都江東区有明3-5-7 TOC有明イーストタワー10F

TEL;03-3527-8396 FAX;03-3527-8520

E-mail: kakouhin@fc.fujikura.co.jp

販売代理店: